



## CK TOTAL EN SANGRE

Código BiosLIS 0302026

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Enzimático / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

Mujer: 20 – 167 UI/L

Hombre: 20 – 189 UI/L


### Valor Crítico

No aplica.



## Interferencias

- **Hemólisis:** Sin interferencias significativas hasta un índice H de 100 (concentración de hemoglobina: aproximadamente  $62.1 \mu\text{mol/L}$  o  $100 \text{ mg/dL}$ ). La magnitud de la interferencia puede variar según el contenido exacto de eritrocitos.
- **Fármacos:** No se han registrado interferencias con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.
- En concentraciones terapéuticas, el **Cyanokit** (hidroxocobalamina) interfieren en el test.

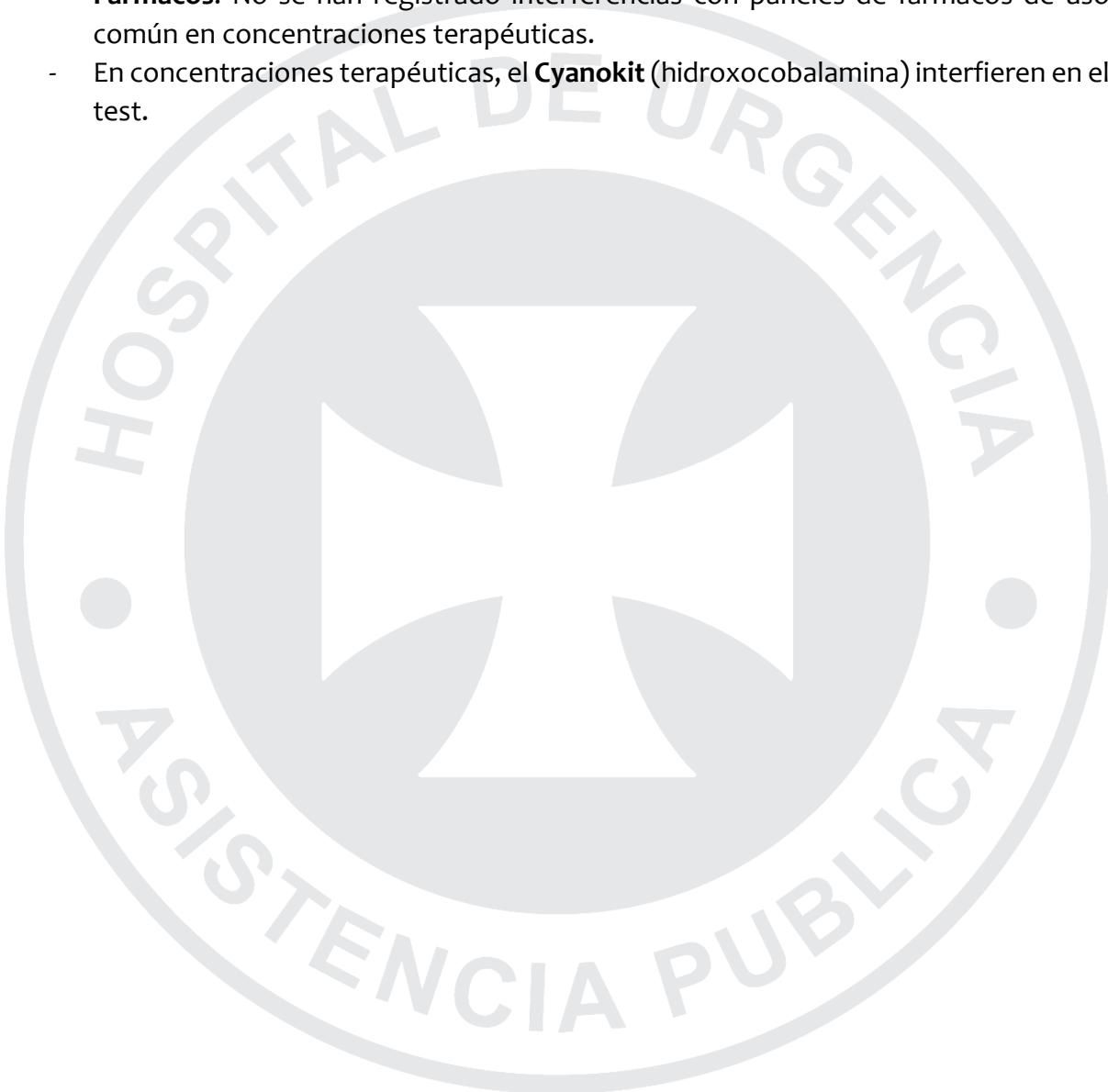

Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico  
Febrero, 2024.

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.