



## FACTOR REUMATOIDEO EN SANGRE

Código BiosLIS 0305020-00

### Horario de procesamiento

- Martes de 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Inmunoabsorción indirecta / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

Mujer: Menor a 14 UI/mL

Hombre: Menor a 14 UI/mL




## Valor Crítico

No aplica.

## Interferencias

- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia a concentraciones terapéuticas con paneles de fármacos de uso común.
- **Efecto prozona (high-dose hook):** aplicando la verificación cinética y con concentraciones de FR hasta 6000 UI/mL, no hubo resultados erróneos sin aviso.

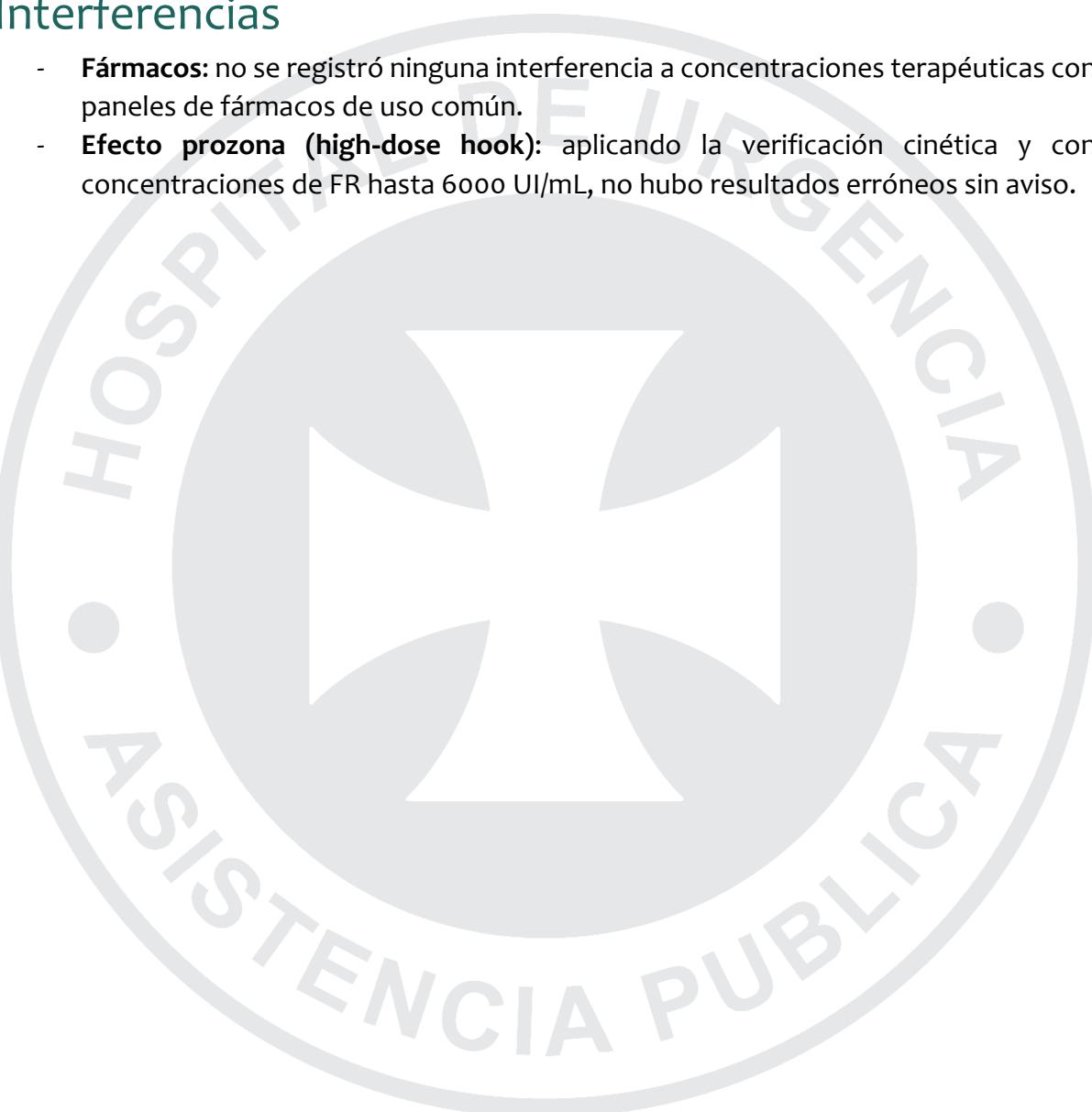

Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.