



## TROPONINA T (alta sensibilidad) EN SANGRE

Código BiosLIS 0302027

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de sodio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Electroquimioluminiscencia/ Cobas 6000 – e411 (Roche).

### Valores de Referencia

- Mujer: 0 - 14 ng/L
- Hombre: 0 - 14 ng/L




## Valor Crítico

$\geq 50$  ng/L

## Interferencias

- Las muestras con concentraciones de hemoglobina  $> 0.1$  g/dL dan resultados falsamente reducidos.
- En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos específicos del analito, la estreptavidina o el rutenio.

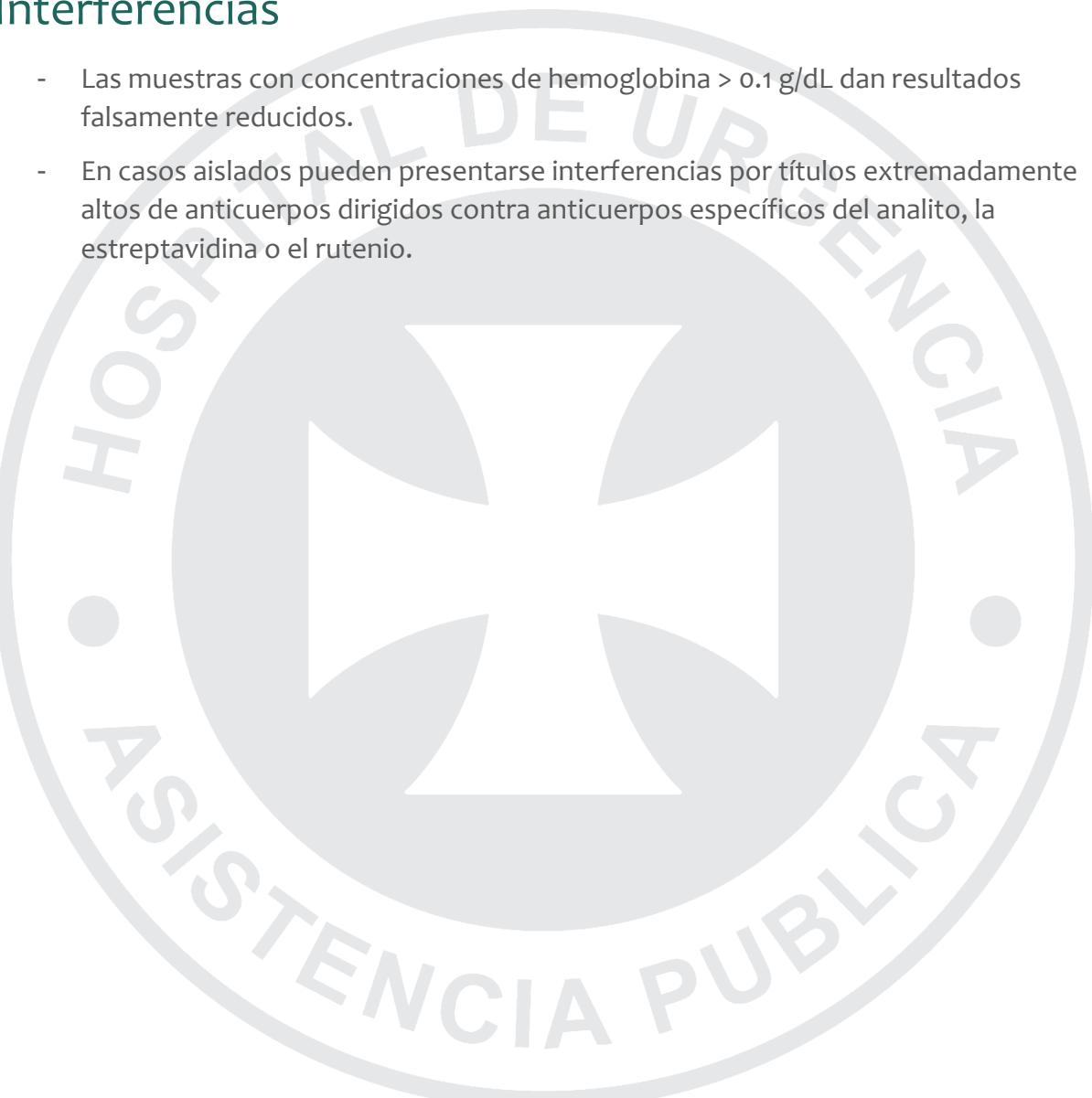

Elaborado por:  
TM. Camila Valenzuela B.  
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.